




**ultraviolet shoe sanitizer  
instruction manual**

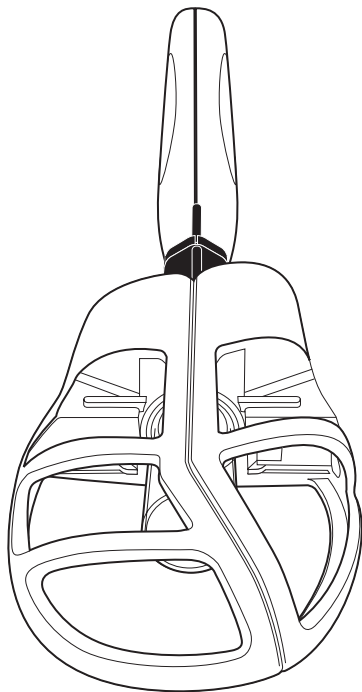

**English  
Français  
Deutsch  
Español**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following.

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER** - To reduce the risk of electrocution:

- Always unplug the SteriShoe® shoe sanitizer immediately after using.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store the SteriShoe® shoe sanitizer where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a SteriShoe® shoe sanitizer that has fallen into water. Unplug immediately.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

- The SteriShoe® shoe sanitizer should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when the SteriShoe® shoe sanitizer is being used by, on, or near children or invalids.
- Use the SteriShoe® shoe sanitizer only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

- Never operate the SteriShoe® shoe sanitizer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any objects into any opening.
- Do not look at the lamp when it is on.
- Do not use the SteriShoe® shoe sanitizer outside a shoe.
- Treat the SteriShoe® shoe sanitizer carefully. You are placing a fragile lamp into a shoe.
- If the SteriShoe® shoe sanitizer does not turn off after approximately 45 minutes, the timer may not be functioning properly. Turn the unit off, disconnect the power, and please call 1-866-686-Shoe(7463).
- If the on/off light is flashing, inspect the lamp to be sure that it is not broken. If the lamp is broken, **DO NOT** put your foot into the shoe until you have removed all of the pieces of the broken lamp.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Specifications:

SteriShoe® ultraviolet shoe sanitizer, Model: STSH-002, 20VDC, 300 mA

Power Adaptor: Input: 100 -240 V, 50/60 Hz, 0.68A Max., Class V; Output: 20VDC, 300 mA

UV lamp: 10VDC, 3W with a peak frequency of 253.7nm.

**SAA120280**



### Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## Thank you for becoming a SteriShoe® customer.

You have taken an important step towards keeping your feet healthy.

### The SteriShoe® sanitizer is:

- Scientifically proven to destroy microorganisms.\*
- Effective on the microorganisms that cause toenail fungus, athlete's foot, and offensive foot odor.
- Non-toxic. Uses no harsh chemicals, sprays or drugs to kill bacteria, fungi, and germs.
- Accepted by the American Podiatric Medical Association.
- Very easy, safe and convenient to use. Just plug it in and push a button!

Please read through this manual to learn how to use your SteriShoe® shoe sanitizer safely and effectively. Let us know how you are enjoying your SteriShoe® sanitizer by e-mailing us at [feedback@SteriShoe.com](mailto:feedback@SteriShoe.com). We love to hear from our customers.

Sincerely,  
Adam Ullman  
President & CEO

\*Independent testing results available at [www.SteriShoe.com](http://www.SteriShoe.com)

## Use your SteriShoe® sanitizer daily

The combination of sweat and heat inside your shoes makes a perfect breeding ground for the bacteria and fungi that cause toenail fungus, athlete's foot, and foul odor. And when foot ailments exist, shoes can be a common source of re-infection.

Therefore, to fully minimize the likelihood of a new infection or re-infection, germs must be eradicated at the risk source daily.

We recommend that you change the UV lamps in your SteriShoe® every two years to guarantee maximum effectiveness killing harmful microbes in your shoes. We will make it easy for you to remember.

**Register your SteriShoe® shoe sanitizer at [www.sterishoe.com/regist.html](http://www.sterishoe.com/regist.html). We will send you an email when it is time to replace the UV lamps.**


## How the SteriShoe® sanitizer works:

The innovative SteriShoe® shoe sanitizer kills the germs that reside inside shoes with a special germicidal ultraviolet light (UVC).

With the first treatment, a SteriShoe® sanitizer destroys up to **99.9%** of the microorganisms in shoes, including the bacteria and fungi that cause toenail fungus (onychomycosis), athlete's foot (tinea pedis) and offensive foot odor.

The SteriShoe® sanitizer is also an excellent choice for those with diabetes or generally concerned about their feet's hygiene.

## Contents

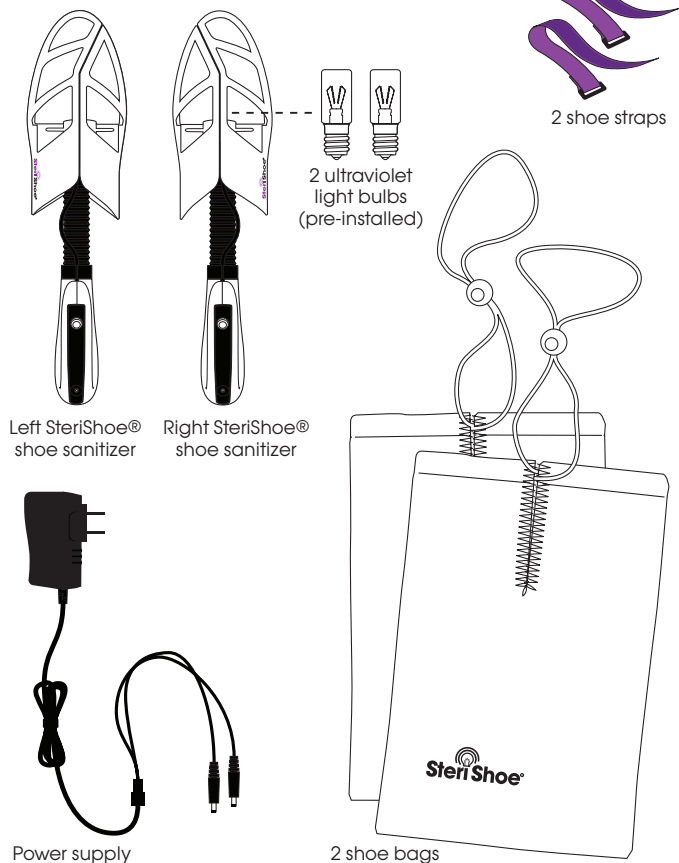

## Using your SteriShoe® device

Your SteriShoe® sanitizer comes with important safety features which prevent exposure to the UVC light. The following is a quick reference on how to safely operate your SteriShoe® ultraviolet shoe sanitizer.

The on/off button functions as a status indicator.

Status states:




no light =  
unit is off



solid light =  
unit is treating a shoe



blinking light =  
an error has occurred

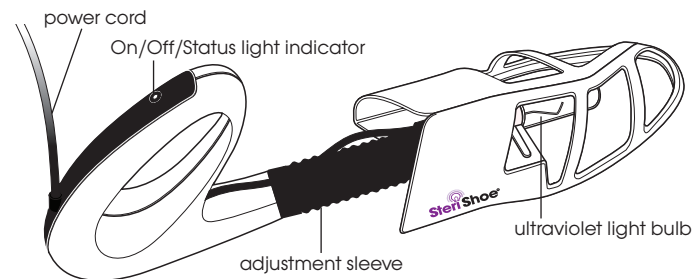


## Use the SteriShoe® shoe sanitizer only as directed.

To prevent errors when using the SteriShoe® shoe sanitizer, please follow these directions:


### Installing or replacing a lamp

Using a soft dry cloth, hold the front of the UV lamp and screw it into the socket in the SteriShoe® ultraviolet shoe sanitizer. Repeat this step for the second SteriShoe® shoe sanitizer.


### General Use Instructions

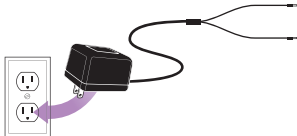


1. Plug the power supply into a standard wall outlet (AC 100-240V).

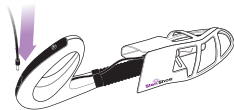


2. Plug one power cord into each SteriShoe® shoe sanitizer.

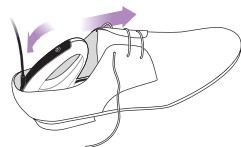

3. Insert the right SteriShoe® shoe sanitizer into a right shoe and the left SteriShoe® shoe sanitizer into a left shoe.

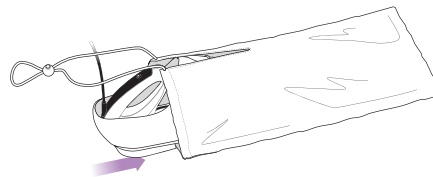

4. Place each SteriShoe® shoe sanitizer and shoe into the provided SteriShoe® branded shoe bag.

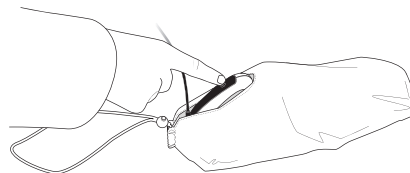

5. Close each shoe bag drawstring.

6. Press each on/off button to begin treating your shoes.

7. If the on/off button is glowing solid purple, the SteriShoe® shoe sanitizer is treating the shoe and will turn off after approximately 45 minutes. **DO NOT** remove the shoe bag while the SteriShoe® shoe sanitizer is treating a shoe.

8. Once the treatment process is complete, the on/off light will no longer be illuminated and it will be safe to remove the SteriShoe® shoe sanitizer from a shoe.

If you need to remove a SteriShoe® shoe sanitizer from a shoe when it is treating a shoe, press the on/off button to turn it off. If the on/off button is not solidly illuminated, then it is safe to remove the SteriShoe® shoe sanitizer as it will not interrupt a treatment.

**Note:** If the on/off button is flashing, one of the safety features was probably activated. See the troubleshooting section (on page 13) for more information.


## Using your SteriShoe® device

The SteriShoe® ultraviolet shoe sanitizer will not work if:

- You use it in a shoe without heel support. The SteriShoe® shoe sanitizer must be compressed to operate. (See instructions for using the SteriShoe® shoe strap on the opposite page.)
- It detects ambient light. The provided shoe bag must be used to darken the shoe environment.

Just like you give your feet a break, give your SteriShoe® shoe sanitizer a break too. Allow your SteriShoe® shoe sanitizer to rest for at least fifteen minutes between uses.

## Using your SteriShoe® shoe strap

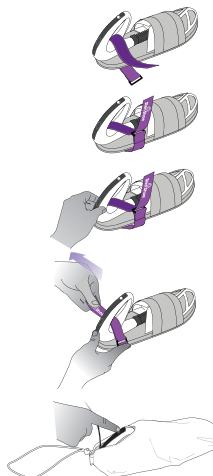

1. Insert opened strap through the SteriShoe® shoe sanitizer handle (with the Velcro material facing outward)
2. Insert strap through the d-ring on the end of the SteriShoe® strap.
3. Push the heel of the SteriShoe® shoe sanitizer forward.
4. While pushing the heel forward, tighten the strap and secure it with the Velcro.
5. Plug in your shoe sanitizers, insert them into the SteriShoe® shoe bags and turn them on.



**DO NOT** allow the shoe strap to go between the front halves of your SteriShoe® sanitizer. For use with shoes where this will occur, reverse the shoe sanitizers (i.e. use the right in the left shoe and the left in the right shoe) to prevent this issue.

## Troubleshooting

There are safety features in the SteriShoe® shoe sanitizer to prevent a user from being exposed to the UV light. If the on/off button is blinking, one of the safety features has likely been activated. The error chart is listed below. If you have any questions, please call 1-866-686-7463, ext 2 for technical assistance.

### Error and Remedy



The ambient light sensor has detected light. Be sure that the SteriShoe® shoe sanitizer is inside a shoe. If the shoe is a sandal or open shoe, be sure to place the SteriShoe® shoe sanitizer and shoe inside the provided shoe bags. If the error is still present, try pressing down on the tongue of the shoe when turning the SteriShoe® shoe sanitizer on or move to a darker room.



The SteriShoe® shoe sanitizer is either not in a shoe or the shoe is too large to compress the safety switch. Try using the SteriShoe® shoe sanitizer in a smaller shoe or

place something, such as a pair of socks, between the heel of the shoe and the SteriShoe® shoe sanitizer. If you are using the SteriShoe® shoe sanitizer with a shoe that does not have heel support, use the SteriShoe® shoe strap to keep the SteriShoe® sanitizer compressed.



The lamp is either damaged or not screwed in completely. If you have this error, unplug the power and switch the lamps between the left and right shoe sanitizers.

- If both units now work (the on/off light remains illuminated), the lamp may have not been screwed in completely.
- If the problem remains with the lamp, e.g. the right shoe sanitizer was not working and after switching the lamps the left shoe sanitizer is not working, then the lamp needs to be replaced.

**Note:** After turning the shoe sanitizer on, it will take approximately 10 seconds for this error indicator to occur. This is the time needed to ignite the UVC lamp.



## Important Information



DO NOT look at the light from your SteriShoe® ultraviolet shoe sanitizer when it is turned on; it emits UV light which can be harmful to eyes and skin. You

can tell when the SteriShoe® shoe sanitizer light is on because the on/off button will be glowing solid purple.

If the on/off button is flashing, an error has occurred. The SteriShoe® shoe sanitizer has built-in safety features to reduce the likelihood of accidental exposure to the UV lamp. An error is most likely due to the activation of a safety feature. See the troubleshooting section for more information.

**LAMP CONTAINS MERCURY (Hg).** The lamp contains a tiny metal ball which you may hear inside the lamp. This is normal; the lamp is not broken. Since mercury is toxic please dispose of the lamp in accordance with local disposal laws. For more information, see: [www.lamprecycle.org/res-statelaws.shtml](http://www.lamprecycle.org/res-statelaws.shtml).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Disclaimers

- The SteriShoe® shoe sanitizer destroys up to 99.9% of the targeted microorganisms. Targeted microorganisms are those that come in direct unobstructed contact with the UV light.
- The SteriShoe® shoe sanitizer does not treat medical conditions; it is intended to provide a clean and healthy environment for feet inside shoes.
- The UV light in the SteriShoe® may discolor the interior of the shoe.
- UV light may accelerate the degradation of certain materials.

## Warranty Information

### Limited One Year Warranty

**Warranty coverage:** Shoe Care Innovations, Inc. ("SCI") warrants, to the original purchaser, that this product will be free of defects in materials or workmanship for a period of one (1) year\* from date of purchase, with the exceptions stated below.

\*The warranty term for lamps is 60 days from the date of purchase.

**What is not covered:** This warranty does not cover damage caused by accident, tampering, improper care, misuse, uses for which the product was not designed, or other causes not arising from defects in material or workmanship.

**Warranty performance:** During the above warranty period, SCI will repair or replace any part of the product deemed defective.

Contact SCI at 1-866-686-Shoe(7463) to obtain warranty service or go to [www.SteriShoe.com](http://www.SteriShoe.com) for more information.

**Warranty disclaimers:** Any implied warranties arising out of this sale, including but not limited to the implied warranties of description, merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the stated warranty coverage. In no event shall SCI be liable for loss of use of this product or for any indirect, special, incidental or consequential damages, or costs, or expenses incurred by the consumer or any other user of this product, whether due to a breach of contract, negligence, strict liability in tort or otherwise. SCI shall have no liability for any personal injury, property damage or any special, incidental, contingent or consequential damage of any kind resulting from the use of this product. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so the above limitation may not apply to you.

**Legal remedies:** This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.



# MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation des produits électriques, surtout en présence d'enfants, des mesures essentielles de précaution devront toujours être prises, y compris les suivantes.

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

**DANGER** - Pour réduire le risque d'électrocution:

- Toujours débrancher l'assainisseur de chaussures SteriShoe® immédiatement après utilisation.
- Ne pas employer lorsque vous vous baignez.
- Ne pas placer ou entreposer l'assainisseur de chaussures SteriShoe® dans un endroit d'où il peut tomber ou être tiré dans la baignoire ou le lavabo.
- Ne pas le placer ou le laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne pas essayer de récupérer l'assainisseur de chaussures SteriShoe® tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.

**AVERTISSEMENT** - Pour réduire le risque de brûlures, électrocution, incendie ou blessure.

- L'assainisseur de chaussures SteriShoe® ne devrait jamais être laissé sans surveillance quand il est branché.
- La surveillance stricte est requise quand l'assainisseur de chaussures SteriShoe® est utilisé par, sur ou en présence des enfants ou invalides.
- Utiliser l'assainisseur de chaussures SteriShoe® uniquement aux fins décrites dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires qui n'ont pas été recommandés pas le fabricant.
- Ne jamais utiliser l'assainisseur de chaussures Steri-

Shoe® si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé sur le sol ou a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

- Garder le cordon électrique loin des surfaces chauffées.
- Ne jamais laisser tomber ou introduire des objets dans les ouvertures.
- Ne pas regarder la lampe quand elle est allumée.
- Ne pas utiliser l'assainisseur de chaussures SteriShoe® en dehors des chaussures.
- Manipuler l'assainisseur de chaussures SteriShoe® avec soin. Vous placez une lampe fragile dans une chaussure.
- Si l'assainisseur de chaussures SteriShoe® ne s'éteint pas après 45 minutes, il est possible que la minuterie ne fonctionne pas bien. Eteignez l'appareil, débranchez la source d'alimentation et téléphonez au 1-866-686-Shoe(7463).
- Si le voyant lumineux on/off clignote, vérifiez la lampe pour vous assurer qu'elle fonctionne. Si elle ne fonctionne plus, NE PAS introduire le pied dans la chaussure avant de ramasser toutes les pièces de la lampe cassée.
- L'usage de cet appareil n'est pas prévu pour des personnes (enfants inclus) souffrant d'infirmités physiques, sensorielles ou mentales, ou bien manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou bien qu'une personne responsable de leur sécurité leur ait donné des instructions concernant l'usage de cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne pas laisser à la portée des enfants.

## GARDER CES INSTRUCTIONS

### Spécificités:

Lampe UV: 10VDC, 3W

Desinfecteur SteriShoe ultraviolet, Model: STSH-002,  
20VDC, 300 mA

Adaptateur secteur: Input 100-240 V, 50/60 Hz, 0.68A  
Max, Class V, Output: 20VDC, 300 mA

**SAA120280**



Ce logo indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en Europe. Afin d'éviter toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé de l'être humain causée par l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Afin de renvoyer votre produit usagé, veuillez utiliser le système de renvoi et collecte ou contactez votre revendeur ou commerçant. Il peut reprendre ce produit afin de le recycler sans danger pour l'environnement.

**Le produit peut être déposé dans une borne de collecte spécifique.**

## Nous vous remercions d'avoir choisi SteriShoe®.

Vous avez fait un pas important pour garder vos pieds en bonne santé.

### Le stérilisateur SteriShoe® est:

- Scientifiquement prouvé pour détruire les micro-organismes.\*
- Efficace contre les microorganismes qui causent la mycose des ongles, le pied d'athlète et une forte odeur des pieds.
- Non toxique. Il n'utilise pas de produits chimiques nocifs, aérosols ou de substances pour détruire les bactéries, les germes et les champignons.
- Accepté par l'Association Médicale Américaine de Podologie.
- Très facile, sûr et pratique à utiliser. Il suffit de le brancher et d'appuyer sur le bouton !

Nous vous invitons à lire le présent Mode d'emploi pour apprendre comment utiliser votre assainisseur SteriShoe® d'une manière sûre et efficace. Envoyez-nous vos opinions concernant l'assainisseur SteriShoe® par email à l'adresse [feedback@SteriShoe.com](mailto:feedback@SteriShoe.com). Nous sommes toujours heureux d'avoir les réactions de nos clients.

Bien à vous,  
Adam Ullman  
Président et PDG

\*Les résultats des tests indépendants sont disponibles sur [www.SteriShoe.com](http://www.SteriShoe.com)

## Utiliser votre assainisseur SteriShoe® chaque jour

La combinaison de transpiration et de chaleur à l'intérieur de vos chaussures constitue un milieu idéal pour le développement des bactéries et champignons qui provoquent des mycoses des ongles, le pied d'athlète et une mauvaise odeur. Et quand il existe des affections pédieuses, les chaussures peuvent représenter une source fréquente de réinfection.

Pour réduire donc au maximum la probabilité d'une nouvelle infection ou réinfection, la source des germes doit être éradiquée quotidiennement.

Nous vous recommandons de changer les lampes UV de votre SteriShoe® tous les deux ans pour garantir une efficacité maximale de la destruction des microbes nocifs qui se trouvent à l'intérieur de vos chaussures.

Nous vous aidons à vous en rappeler :

**Enregistrer votre assainisseur de chaussures SteriShoe® sur [www.sterishoe.com/regist.html](http://www.sterishoe.com/regist.html).**

**Nous vous enverrons un email quand le moment sera venu de remplacer les lampes UV.**


## Comment l'assainisseur SteriShoe® fonctionne-t-il ?

L'assainisseur de chaussures innovateur, SteriShoe®, détruit les germes qui se trouvent à l'intérieur des chaussures à l'aide des propriétés spéciales germicides de la lumière ultraviolette (UVC).

Depuis le premier traitement, un assainisseur SteriShoe® détruit jusqu'à **99.9%** des microorganismes trouvés à l'intérieur des chaussures, y compris les bactéries et les champignons qui provoquent la mycose des ongles (onychomycoses), le pied d'athlète (tinea pedis) et une forte mauvaise odeur.

L'assainisseur SteriShoe® représente également un excellent choix pour ceux qui souffrent de diabète ou ceux qui sont préoccupés en général de l'hygiène de leurs pieds.



## Contenus

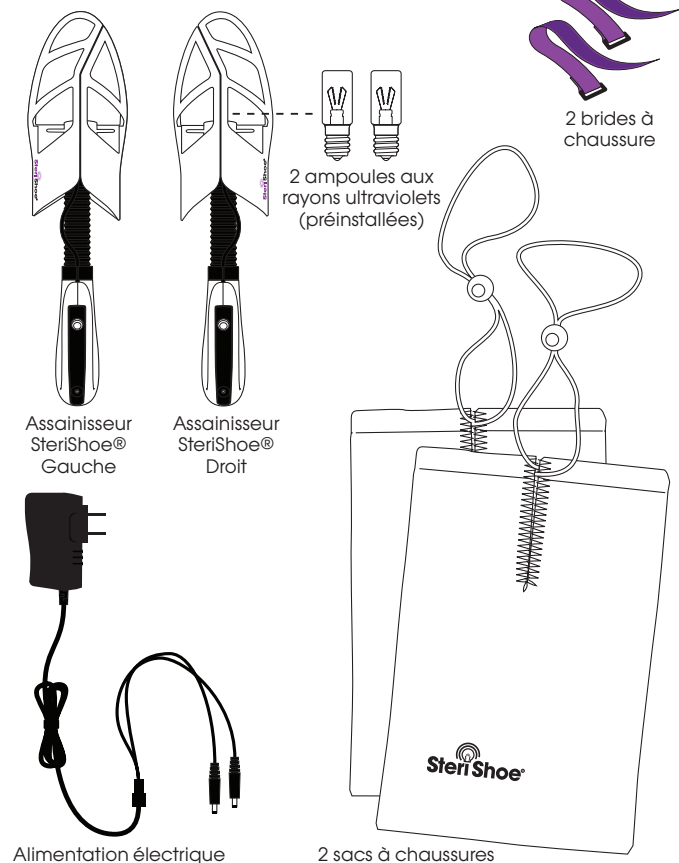

## Utiliser votre dispositif SteriShoe®

Votre assainisseur SteriShoe® est livré avec des éléments de sécurité avancés qui empêchent l'exposition aux rayons ultraviolets. Dans ce qui suit vous trouverez des indications sur la modalité sûre d'utilisation de votre assainisseur de chaussures SteriShoe® UV.

La touche ON/OFF fonctionne comme un indicateur d'état. Etat:

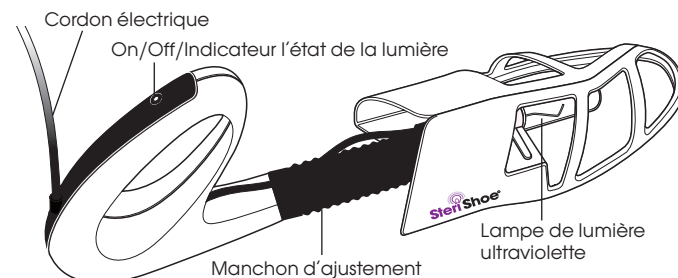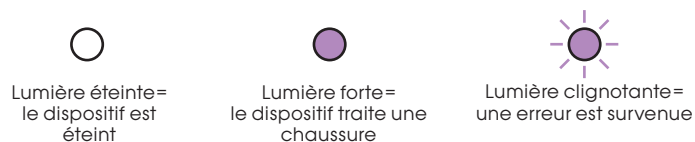


## Utiliser l'assainisseur de chaussures SteriShoe® uniquement selon les indications.

Pour éviter les erreurs lors de l'utilisation de l'assainisseur de chaussures SteriShoe®, veuillez suivre les indications suivantes :


### Installation ou remplacement d'une lampe

A l'aide d'un chiffon sec et doux, tenez l'avant de la lampe UV et introduisez-la dans le sac de l'assainisseur de chaussures SteriShoe® UV. Répétez cette étape pour le second assainisseur de chaussures SteriShoe®.


### Instructions générales d'utilisation

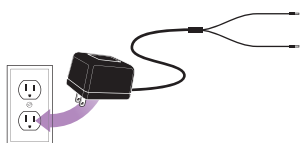


**1.** Brancher le câble d'alimentation dans une prise murale standard (AC 100-240V).

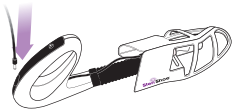


**2.** Brancher un cordon d'alimentation dans chaque assainisseur de chaussures

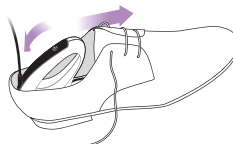

**3.** Introduire l'assainisseur de chaussure SteriShoe® droit dans la chaussure droite et l'assainisseur chaussure SteriShoe® gauche dans la chaussure gauche.

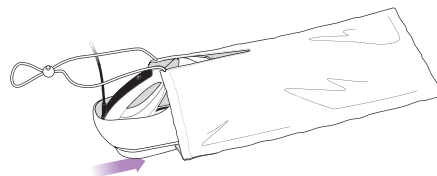

**4.** Placer chaque assainisseur de chaussure SteriShoe® et la chaussure dans le sac à chaussure portant la marque SteriShoe®.

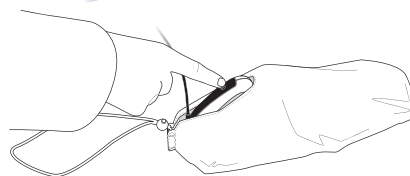

**5.** Fermer chaque sac à chaussures par le cordon coulissant.

**6.** Appuyer sur chaque bouton ON/OFF pour commencer à traiter vos chaussures.

**7.** Si le bouton ON/OFF est allumé en violet foncé, l'assainisseur de chaussures SteriShoe® est en train de traiter vos chaussures et il s'éteindra après environ 45 minutes. NE PAS enlever le sac à chaussures lors du traitement de la chaussure avec l'assainisseur de chaussures SteriShoe®.

**8.** Une fois le processus de traitement fini, le bouton ON/OFF ne sera plus allumé et on pourra retirer en toute sécurité l'assainisseur SteriShoe® d'une chaussure.

Si vous avez besoin de retirer un assainisseur SteriShoe® d'une chaussure pendant que le traitement est en train de s'effectuer, veuillez appuyer sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre. Si le bouton n'est pas illuminé de manière intense, alors vous pouvez retirer



l'assainisseur de chaussures SteriShoe® en toute sécurité car cela n'interrompra pas le traitement.

**Attention :** Si le bouton ON/OFF clignote, un des dispositifs de sécurité a probablement été activé. Consultez la section Dépannage (page 33) pour plus d'informations.


## Utiliser votre dispositif SteriShoe®

Votre assainisseur SteriShoe® à UV ne fonctionnera pas si :

- Vous l'utilisez dans une chaussure sans attache au talon. L'assainisseur chaussure SteriShoe® doit subir de la pression pour fonctionner. (Voir les instructions pour l'utilisation des brides des chaussures SteriShoe® sur la page à côté.)
- Il détecte de la lumière ambiante. Le sac à chaussures mis à disposition doit être utilisé pour assombrir le milieu où se trouve la chaussure.

Tout comme vous donnez un répit à vos pieds, accordez-en un à votre assainisseur de chaussures SteriShoe® aussi. Permettez à l'assainisseur SteriShoe® de se reposer pendant au moins quinze minutes entre les utilisations.

## Comment utiliser les brides de chaussures de votre SteriShoe®

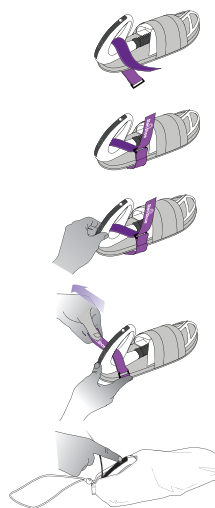

1. Insérer la bride ouverte par la poignée de l'assainisseur de chaussure SteriShoe® (par la couche Velcro orientée vers l'extérieur)
2. Insérer la bride par l'anneau qui se trouve à l'extrémité de la bride SteriShoe®.
3. Pousser le talon de l'assainisseur de chaussures SteriShoe® en avant.
4. Lorsque vous poussez le talon en avant, serrer la bride et sécuriser-la par le Velcro.
5. Branchez les assainisseurs de chaussures, insérer les dans le sac à chaussures SteriShoe® et mettez les en marche.



**NE PAS** permettre à la bride de glisser parmi les parties frontales de votre assainisseur SteriShoe®. Pour les utilisations où cela arrivera inverser les assainisseurs de chaussures. (ex. utiliser la droite dans la chaussure gauche et la gauche dans la chaussure droite) pour prévenir ce type de problème.

## Depannage

L'assainisseur de chaussures SteriShoe® est doté d'éléments de sécurité pour empêcher que les utilisateurs soient exposés à la lumière UV. Si le bouton ON/OFF clignote, une des fonctions de sécurité a probablement été activée. Vous trouverez dans ce qui suit une liste des erreurs. Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au 1-866-686-7463, option N°2 pour de l'assistance technique.

### Erreur et Solution



clignotement pause clignotement

Le capteur de lumière a détecté de la lumière. Assurez-vous que l'assainisseur de chaussures SteriShoe® est à l'intérieur d'une chaussure. Si la chaussure est une sandale ou une chaussure ouverte, assurez-vous d'avoir introduit l'assainisseur SteriShoe® dans le sac qui a été mis à votre disposition à cet effet. Si l'erreur persiste, essayez de presser sur la languette de la chaussure quand vous mettez en marche l'assainisseur de chaussures SteriShoe® ou allez dans une pièce plus sombre.



clignotement clignotement pause clignotement clignotement

L'assainisseur de chaussures SteriShoe® soit n'est pas introduit dans une chaussure, soit la chaussure est

trop large pour une pression sur l'interrupteur de sécurité. Essayer d'utiliser l'assainisseur de chaussures SteriShoe® dans une chaussure plus petite ou introduisez quelque chose, comme par exemple une paire de chaussettes entre le talon de la chaussure et l'assainisseur chaussure SteriShoe®. Si vous utilisez l'assainisseur de chaussures SteriShoe® sur des chaussures qui n'ont pas de talon, utilisez la bride de chaussure SteriShoe® pour maintenir la pression.



clignotement clignotement clignotement pause clignotement clignotement clignotement

La lampe est soit cassée soit elle n'est pas introduite complètement. Si vous vous confrontez à cette erreur, débranchez le cordon d'alimentation et inversez les lampes entre les assainisseurs de chaussures droit et gauche.

- Si aucune des deux unités ne fonctionne (le témoin lumineux ON/OFF reste allumé), il est possible que la lampe n'ait pas été entièrement introduite.
- Si le problème de la lampe persiste, par exemple, l'assainisseur droit ne fonctionnait pas et après avoir inversé les lampes, l'assainisseur gauche ne fonctionne pas, alors les lampes doivent être remplacées.

**Attention :** Après avoir mis en marche l'assainisseur de chaussures, cette erreur d'indication se produira pendant environ 10 secondes. C'est la durée nécessaire pour le démarrage de la lampe UVC.

## Informations importantes



**NE PAS** regarder la lumière provenant de votre assainisseur de chaussures UV SteriShoe® quand il est en marche ; il émet de la lumière UV qui pourrait

nuire à vos yeux et à votre peau. Vous pouvez savoir quand la lumière de l'assainisseur de chaussures SteriShoe® est allumée car le bouton ON/OFF aura une forte couleur violette.

Si le bouton ON/OFF clignote, une erreur est survenue. L'assainisseur de chaussures SteriShoe® est doté d'éléments de sécurité pour réduire les possibilités d'exposition accidentelle à la lampe UV. Une erreur est le plus souvent due à l'activation d'un élément de sécurité. Voir la section dépannage pour plus d'informations.

LA LAMPE CONTIENT DU MERCURE (Hg). La lampe contient une balle minuscule en métal que vous pouvez entendre à l'intérieur de la lampe. Cela est normal et ne veut pas dire que la lampe est cassée. Puisque le mercure est toxique veuillez utiliser la lampe en conformité avec les lois locales en vigueur. Pour plus d'information visiter : [www.lamprecycle.org/res-statelaws.shtml](http://www.lamprecycle.org/res-statelaws.shtml).

Le dispositif est conforme au Point 15 des lois de la Commission Fédérale de la Communication. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) le présent dispositif ne provoquera pas de d'interférences nuisibles et (2) le présent dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré.

**Avvertissement :** Toute modification sur cette unité n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisation du dispositif.

### Avis de non responsabilité

- L'assainisseur de chaussures SteriShoe® détruit jusqu'à 99,9% des microorganismes cibles. Les microorganismes cibles sont ceux qui viennent en contact direct et non obstrué avec la lumière UV.
- L'assainisseur de chaussures SteriShoe® ne traite pas de troubles médicaux ; il est conçu pour fournir un environnement sain et propre aux pieds qui sont à l'intérieur de la chaussure.
- La lumière UV du SteriShoe® peut décolorer l'intérieur de la chaussure.
- La lumière UV peut accélérer la dégradation des certains matériaux.

## Informations relatives à la garantie

Garantie limitée à un an

**Couverture de votre garantie :** Shoe Care Innovations, Inc. ("SCI") offre la garantie, à l'acheteur original, que ce produit sera exempt de défauts en ce qui concerne le matériel ou la fabrication pour une période d'un an (1)\* à partir de la date d'achat, avec les suivantes exceptions.

\* La période de garantie pour les lampes est de 60 jours à partir de la date d'achat.

**Exclusions de garantie :** La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par les accidents, falsification, soins inadéquats, utilisation dans des buts auxquels ce produit n'a pas été destiné, utilisation abusive ou autres causes qui ne dérivent pas de défauts de matériel ou de fabrication.

**Rendement de la garantie :** Durant la période mentionnée de garantie, SCI réparera toute partie du produit jugée défectueuse. Contacter SCI au 1-866-686-Shoe(7463) pour avoir le service de garantie ou rendez-vous sur [www.SteriShoe.com](http://www.SteriShoe.com) pour plus d'information.

**Exonérations de garantie :** Toutes garanties qui

dérivent de la présente vente, y compris, mais pas limitées aux garanties de description, de commercialisation et d'adaptation à un objectif particulier, ont une durée limitée à la couverture de garantie mentionnée. SCI ne sera tenu responsable en aucun cas pour la perte de droit d'utilisation du présent produit ou pour tout dommage indirect ou spécial, accidentel ou subséquent, ou couts, ou d'éventuelles dépenses supportées par le client ou tout autre usager du produit, que ce soit à cause de la violation du contrat ou à cause de la négligence, responsabilité stricte en matière délictuelle ou autrement.

SCI ne sera pas tenu responsable pour aucune blessure personnelle, dégâts matériels ou tout autre dégât spécial, accessoire, contingent ou subséquent, de toute sorte, qui résulte de l'utilisation du présent produit. Il y a des états qui ne permettent pas des limitations sur la durée de la garantie impliquée ou sur l'exclusion ou limitation des préjudices subséquents ou contingents et il est donc possible que la présente limitation ne s'applique pas dans votre cas.

**Voie de droit :** La présente garantie vous offre des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires qui varient d'un état à l'autre.



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn elektrische Geräte vornehmlich in der Nähe von Kindern verwendet werden, sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden, immer beachtet werden.

### **BITTE LESEN SIE DIE VORLIEGENDEN ANWEISUNGEN DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN**

**GEFAHR** - Um das Stromschlagrisiko zu verhindern:

- Nach jedem Gebrauch sofort den Stecker des SteriShoe® Sanitizers aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht beim Baden verwenden.
- Stellen Sie den SteriShoe® Sanitizer nicht auf Oberflächen, die in der Nähe von der Badewanne oder dem Abwaschbecken sind.
- Das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.
- Niemals einen SteriShoe® Sanitizer verwenden, der ins Wasser gefallen ist. Sofort den Stecker herausziehen.

**WARNHINWEISE** - um Brand- oder Stromschlagsverletzungsrisiken bei Menschen zu vermeiden:

- Lassen Sie den SteriShoe® Sanitizer niemals unbeaufsichtigt, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Besondere Aufsicht ist nötig wenn der SteriShoe® Sanitizer von, oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird.
- Den SteriShoe® Sanitizer ausschließlich gemäß der vorliegenden Bedienungsanleitung verwenden. Verwenden Sie kein Sonderzubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde.
- Den SteriShoe® Sanitizer niemals verwenden, wenn er Beschädigungen am Stromkabel oder Stecker auf-

weist, wenn er nicht einwandfrei funktioniert, wenn er auf den Boden gefallen ist, wenn er in Wasser getaucht wurde oder wenn er sonst beschädigt wurde.

- Das Stromversorgungskabel nicht mit erhitzten Oberflächen in Berührung bringen.
- Keine Kleinteile in die Öffnungen des Gerätes stecken.
- Schauen Sie nie direkt in die eingeschaltete UV Lampe.
- Den SteriShoe® Sanitizer nie außerhalb des Schuhs verwenden.
- Behandeln Sie den SteriShoe® Sanitizer sorgfältig. Bedenken Sie: Sie führen eine zerbrechliche Lampe in den Schuh ein.
- Wenn sich der SteriShoe® Sanitizer nach 45 Minuten nicht automatisch ausschaltet, könnte es sein, dass der Timer nicht einwandfrei funktioniert. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker heraus und rufen sie die folgende Telefonnummer an 1-866-686-7463.
- Wenn die Ein-/Aus-Lampe blinkt, überprüfen Sie die Unversehrtheit der Lampe. Sollte sie beschädigt sein, die Schuhe bitte NICHT anziehen, bevor Sie alle entstandenen Glasscherben entfernt haben.
- Dieses Gerät ist ungeeignet für die Verwendung durch Personen (inkl. Kinder) mit reduzierten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn sie werden von einer Person überwacht und angeleitet, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

### Spezifikation:

SteriShoe® Sanitizer, Modell: STSH-002, 20VDC, 300 mA

Netzteil: Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,68A Max., Klasse V; Ausgang: 20VDC, 300 mA

UV-Lampe: 10VDC, 3W

**SAA120280**



### Richtige Entsorgung dieses Produkts



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll in der EU entsorgt werden sollte. Damit möglicher Schaden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert wird, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu fördern. Um Ihr verwendetes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt umweltgerecht recyceln.

## Liebe Kundin, lieber Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Kauf des SteriShoe®.

Sie sind jetzt Ihrer Fußgesundheit einen großen Schritt näher gekommen.

### Der SteriShoe® Sanitizer ist:

- Wissenschaftlich belegt, Mikroorganismen erfolgreich zu bekämpfen.\*
- Wirksam gegen Mikroorganismen, die Zehennagelpilz, Fußpilz oder unangenehme Fußgerüche verursachen.
- Nicht toxisch. Er verwendet keine aggressive Chemikalien, Sprühmittel oder Arzneimittel, um Bakterien, Fungi oder Keime abzutöten.
- Von der Amerikanischen Medizinischen Podiatrie Gesellschaft anerkannt.
- Sehr einfach, sicher und bequem zu verwenden. Einfach einstecken, und das Gerät einschalten!

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und lernen Sie, wie Sie Ihren SteriShoe® Sanitizer sicher und einwandfrei benutzen. Teilen Sie uns per E-mail an [feedback@SteriShoe.com](mailto:feedback@SteriShoe.com) mit, ob Sie mit Ihrem SteriShoe® zufrieden sind. Wir legen großen Wert auf die Meinung unserer Kunden.

Besten Dank,  
Adam Ullman  
Geschäftsführer

\*Unabhängige Testergebnisse finden Sie unter [www.SteriShoe.com](http://www.SteriShoe.com)

## Verwenden Sie Ihren SteriShoe® Sanitizer täglich

Die Kombination aus Schweiß und Wärme in Ihren Schuhen ist der perfekte Lebens- und Vermehrungsraum von Bakterien und Fungi, die für Fußkrankheiten wie Zehennagelpilz, Fußpilz, oder für unangenehmen Fußgeruch verantwortlich sind. Wenn solche Gesundheitszustände bestehen, können Schuhe zu Wiederansteckung mitführen.

Daher, um die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung oder Wiederansteckung auf ein Mindestmaß zu reduzieren, sollten die Bakterien täglich direkt am Ort der Entstehung abgetötet werden.

Wir empfehlen Ihnen die UV Lampen des SteriShoe® Sanitizers alle zwei Jahren auszuwechseln, um maximale Wirksamkeit in der Bekämpfung gesundheitsschädlicher Mikroorganismen zu erzielen.

**Melden Sie Ihren SteriShoe® Sanitizer unter [www.sterishoe.com/regist.html](http://www.sterishoe.com/regist.html) an. Wir werden Sie per E-mail informieren, wann die UV Lampen ausgetauscht werden müssen.**

## So funktioniert der SteriShoe® Sanitizer:


Anhand von einem speziellen entkeimenden UV Licht (UVC Strahlung), tötet der innovative SteriShoe® Sanitizer alle Bakterien aus, die in Ihren Schuhen vorkommen.

Schon beim ersten Gebrauch, **99.9%** tötet der SteriShoe® Sanitizer bis zu der Mikroorganismen in ihren Schuhen aus, einschließlich Bakterien und Fungi die für Zehennagelpilz (Onychomykose), Fußpilz (Tinea Pedis) oder unangenehmen Fußgeruch verantwortlich sind.

Der SteriShoe® Sanitizer ist eine hervorragende Wahl auch für Diabetiker, die üblicherweise für die Gesundheit ihrer Füße besonders Sorge tragen müssen.




## Lieferumfang

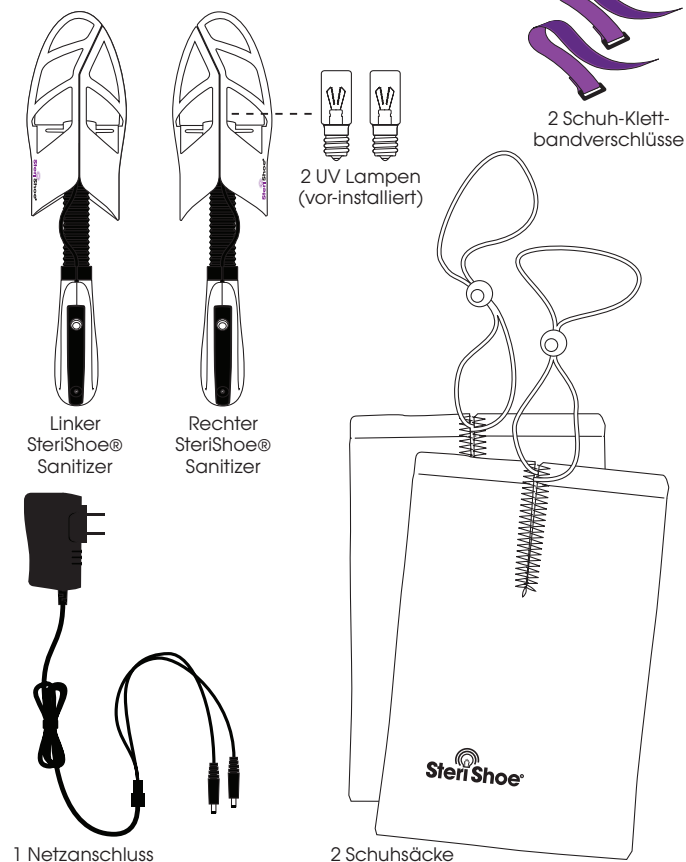

## Inbetriebnahme des SteriShoe® Sanitizers

Ihr SteriShoe® Sanitizer ist mit wichtigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Sie vor ungewollter UV-Bestrahlung zu schützen. Hier finden Sie eine kurze Anleitung zum sicheren Gebrauch Ihres SteriShoe® UV Sanitizers.

Der Ein-/Ausschalter funktioniert als Statuslampe folgendermaßen:

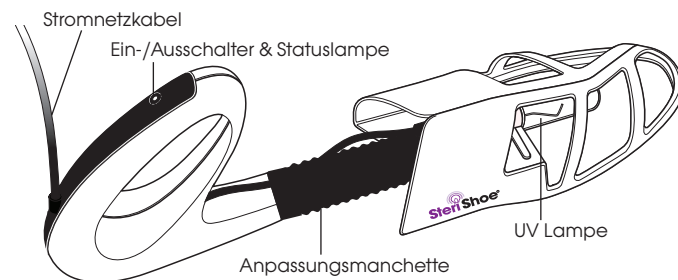


## Verwenden Sie den SteriShoe® Sanitizer ausschließlich gemäß der Herstellerempfehlungen

Um Störungen zu verhindern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise bei der Inbetriebnahme des SteriShoe® Sanitizers:


### Lampeninstallation und -auswechslung

Nutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch, fassen Sie die Lampe an der Vorderseite an, und schrauben Sie sie in die Gewindebuchse Ihres SteriShoe® UV Schuh Sanitizers. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten SteriShoe® Sanitizer.


### Allgemeine Bedienungshinweise

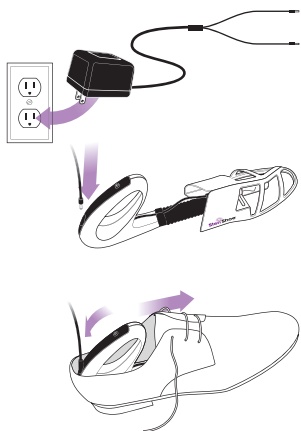

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Standard-Wanddose (Wechselstrom 100-240V) ein.
2. Stecken Sie ein Stromkabel in jeden SteriShoe® Sanitizer.
3. Legen Sie den rechten SteriShoe® Sanitizer in einen rechten Schuh, bzw. den linken Sanitizer in einen linken Schuh ein.

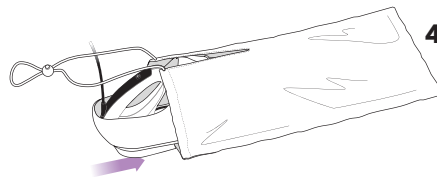

4. Packen Sie jeden Schuh mit dem SteriShoe® Sanitizer in einen der mitgelieferten SteriShoe® Schuhsäcke.

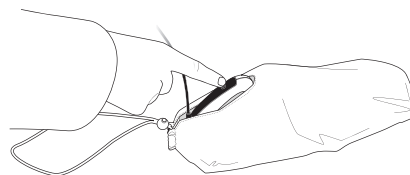

5. Schliessen Sie die Säcke mit der Schnur.

6. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter um den Sterilisationsvorgang zu beginnen.

7. Solange in der Kontrolllampe am Ein-/Ausschalter ein konstantes violettes Licht leuchtet, sterilisiert das SteriShoe® Gerät ihren Schuh und wird nach ungefähr 45 Minuten ausschalten. Während des Sterilisationsvorgangs den Schuh NICHT aus dem Schuhsack herausnehmen.

8. Wenn der Sterilisationsvorgang fertig ist, erlischt die Kontrolllampe. Jetzt, ist es erlaubt den SteriShoe® Sanitizer aus den Schuh herauszunehmen.

Wenn Sie den SteriShoe® Sanitizer während des Sterilisationsvorgangs aus dem Schuh herausnehmen möchten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten. Wenn die Kontrolllampe nicht mehr konstant leuchtet, ist es erlaubt den SteriShoe® Sanitizer herauszunehmen.

**Achtung:** Wenn die Kontrolllampe blinkt, wurde eines der Sicherheitselemente aktiviert. Weitere Informationen darüber finden Sie im Kapitel „Problemlösung“ (Seite 53).

## Inbetriebnahme Ihres SteriShoe® Gerätes


Der SteriShoe® UV Schuh Sanitizer wird nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn:

■ Sie ihn ohne Fersenstütze gebrauchen. Der Steri-Shoe® Sanitizer benötigt Kompressionsdruck um zu funktionieren. (Die Gebrauchsanleitung für die SteriShoe® Schuh-Klettbandverschlüsse finden Sie auf der nächsten Seite.)

■ er Umgebungslicht detektiert. Die mitgelieferte Schuhsäcke sollen verwendet werden, um die Schuhumgebung zu verdunkeln.

Genau so wie Sie ihren Füßen erlauben, sich auszuruhen, geben Sie auch Ihrem SteriShoe® Sanitizer eine Pause. Erlauben Sie ihrem SteriShoe® Sanitizer eine Pause von mindestens 15 Minuten vor dem nächsten Gebrauch.

## Gebrauch der SteriShoe® Schuh-Klettbandverschlüsse

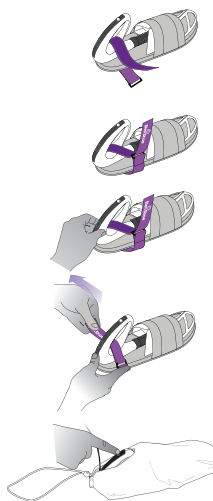

1. Ziehen Sie den geöffneten Bandverschluss durch den Griff des Steri-Shoe® Sanitizer (mit dem Klettband nach außen gerichtet).
2. Ziehen Sie den Bandverschluss durch den D-Ring, der sich am Ende des Bandverschlusses befindet.
3. Schieben Sie die Ferse des SteriShoe® Sanitizers nach vorne.
4. Solange Sie die Ferse nach vorne schieben, ziehen Sie den Bandverschluss straff und befestigen Sie ihn anhand des Klettbands.
5. Schließen Sie Ihren SteriShoe® Sanitizer an, ziehen Sie die Schuhe in die SteriShoe® Schuhsäcke, und schalten Sie das Gerät ein.



Lassen Sie den Schuh-Klettbandverschluss **NICHT** zwischen die Vorderhälften des SteriShoe® Sanitizer rutschen. Um dieses Problem zu verhindern, tauschen Sie die Sanitizer beim Gebrauch in Schuhen bei denen es passieren würde, gegeneinander aus (d.h. den linken Sanitizer in den rechten Schuh, bzw. den rechten Sanitizer in den linken Schuh).

## Problemlösung

Ihr SteriShoe® Sanitizer wurde mit Sicherheitsfunktionen geliefert, um eine UV-Bestrahlung des Verwenders zu verhindern. Wenn die Kontrolllampe blinkt, wurde eine Sicherheitsfunktion aktiviert. Nachfolgend finden Sie eine Liste der möglichen Störungen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie uns für technische Unterstützung (in Englischer Sprache) an unter: 1-866-686-7463, ext 2.

### Störung und Abhilfe



Blinklicht Pause Blinklicht

Der Umgebungslicht-Sensor hat ein Licht detektiert. Stellen Sie sicher, dass der SteriShoe® Sanitizer sich im Schuh befindet. Wenn der Schuh eine Sandale oder ein offener Schuh ist, stellen Sie sicher, dass Sie den Schuh und den SteriShoe® Sanitizer in die mitgelieferten Schuhsäcke einführen. Wenn die Störung nicht behoben ist, probieren Sie die Zunge des Schuhs zu drücken, wenn Sie den SteriShoe® Sanitizer einschalten, oder bringen Sie das Gerät in ein dunkleres Zimmer.



Blinklicht Blinklicht Pause Blinklicht Blinklicht

Der SteriShoe® Sanitizer wurde entweder in keinen Schuh eingeführt, oder der Schuh ist zu groß, um den

benötigten Kompressionsdruck zu erzeugen. Probieren Sie den SteriShoe® Sanitizer in einem kleineren Schuh zu verwenden, oder stecken Sie etwas (z.B. ein Paar Socken) zwischen den Fersenbereich des Schuhs und den SteriShoe® Sanitizer. Wenn Sie den SteriShoe® Sanitizer in einem Schuh verwenden, der keine Hinterkappe hat, benutzen Sie den mitgelieferten Klettbandverschluss, um den SteriShoe® Sanitizer zu komprimieren.



Blinklicht Blinklicht Blinklicht Pause Blinklicht Blinklicht Blinklicht

Die Lampe wurde entweder beschädigt, oder unvollständig eingeschraubt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen, stellen Sie das Gerät ab, und setzen Sie die Lampe des rechten Sanitizers in den linken Sanitizer ein. Testen Sie das Gerät noch einmal.

- Wenn beide Sanitizer jetzt funktionieren (die Kontrolllampe am Ein-/Ausschalter konstant leuchtet), waren die Lampen unvollständig eingeschraubt.
- Wenn die Störung nicht behoben ist, z. B. wenn zuerst der rechte Sanitizer nicht funktioniert hat, und, nach dem Austausch der Lampen funktioniert der linke Sanitizer nicht mehr, muss die Lampe ausgewechselt werden.

**Achtung:** Nachdem Sie den SteriShoe® Sanitizer eingeschaltet haben, dauert es ungefähr 10 Sekunden bis ein Störungs-Signal auftreten kann. Diese kurze Laufzeit ist nötig, um die UVC Lampe einzuschalten.

## Wichtige Informationen



Schauen Sie **NIE** in das Licht des SteriShoe® Sanitizers, wenn die Lampe an ist; es strahlt ein UV Licht aus, das schädlich für Ihre Haut und Augen sein kann. Sie

merken, ob das UV Licht des SteriShoe® Sanitizers an ist, in dem sie auf die Kontrollampe am Ein-/Ausschalter schauen und wenn diese ein konstantes violettes Licht anzeigt.

Wenn die Kontrollampe blinkt, ist eine Störung aufgetreten. Ihr SteriShoe® Sanitizer ist mit wichtigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um die Wahrscheinlichkeit einer ungewollten Bestrahlung von Menschen mit UV-Strahlen zu verhindern. Höchstwahrscheinlich ist eine Störung auf die Aktivierung eines Sicherheitselement zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel „Problemlösung“.

DIE LAMPEN ENTHALTEN QUECKSILBER (Hg). Die Lampen enthalten eine kleine metalische Kugel, die Sie in der Lampe hören können. Das ist normal, die Lampe ist nicht beschädigt. Weil Quecksilber toxisch ist, beachten Sie bitte bei der Entsorgung die lokalen Entsorgungsgesetze.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der Amerikanischen FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

**Warnhinweis:** Änderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen der Hersteller nicht ausdrücklich zustimmt, können zum Entzug der Inbetriebnahme-Berechtigung des Käufers für dieses Produkt führen.

### Ausschlussklausel für Haftung

- Der SteriShoe® Sanitizer tötet bis zu 99,9 % der anvisierten Mikroorganismen. Die anvisierten Mikroorganismen sind diejenigen, die in direkten, ungehinderten Kontakt mit dem UV Licht kommen.
- Der SteriShoe® Sanitizer heilt keine Krankheit; er soll verwendet werden, um für Ihre Füße ein sauberes und gesundes Umfeld in Ihren Schuhen zu schaffen.
- Das UV Licht des SteriShoe® Gerätes kann zur Verfärbung des Innenbereiches Ihrer Schuhe führen.
- Das UV Licht kann zu einer schnelleren Degradierung bestimmten Materialien führen.

## Gewährleistungsinformationen

Das Produkt ist durch eine einjährige beschränkte Garantie abgedeckt.

**Garantiedeckung:** Shoe Care Innovations, Inc. ("SCI") leistet dem ursprünglichen Käufer dafür Gewähr, dass dieses Produkt keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist, und zwar für den Zeitraum eines (1) Jahres\* ab dem Kauftag, mit den nachstehend aufgeführten Ausnahmen.

\*Die Gewährleistung für die Lampen ist auf einen Zeitraum von 60 Tagen ab dem Kauftag beschränkt.

**Nicht im Garantieumfang enthalten:** Die Gewährleistung erlischt bei Schäden, die durch Unfälle, unerlaubte Eingriffe, unsachgemäße Behandlung, falsche Bedienung, zweckentfremdete Verwendung, oder durch sonstige Gründe, die nicht auf Material- und Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, verursacht wurden.

**Gewährleistung:** Innerhalb der obengennanten Garantiezeit, wird SCI alle defekten Bestandteile reparieren oder ersetzen. Bei Gewährleistungsanspruch, rufen Sie SCI an unter 1-866-686-Shoe(7463) oder lesen Sie weitere Informationen unter [www.SteriShoe.com](http://www.SteriShoe.com).

**Haftungsausschlüsse:** Alle impliziten Garantien in Bezug auf diesen Verkauf, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschreibung, Marktgängigkeit und Eignung für bestimmte Zwecke, sind streng auf die Dauer der obengennanten beschränkten Gewährleistung begrenzt. Unter keinen Umständen ist SCI haftbar für den Nutzungsausfall des Produktes, oder für alle sonstigen indirekten, besonderen, zufälligen oder daraus folgenden Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben die der Kunde oder ein dritter Verbraucher erleidet, ob aufgrund eines Vertragsbruches, einer Fahrlässigkeit, einer Gefährdungshaftung oder anderer Gründe. SCI ist auf keinem Fall haftbar für Personenverletzungen, Sachbeschädigungen, oder andere besondere, beiläufige, zufällige, oder daraus folgende Schäden irgendeiner Art, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen. Einige Länder erlauben keine Beschränkungen auf die Gültigkeitsdauer einer impliziten Garantie oder untersagen den Ausschluss oder die Begrenzung von beiläufigen oder zufälligen Schäden, daher könnten diese Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie zutreffen.

**Rechtsbelehrung:** Aufgrund dieser Gewährleistung entstehen genau bezeichnete rechtliche Ansprüche Ihrerseits. Je nach Land können Ihnen weitere Ansprüche zustehen.



# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, las precauciones básicas de seguridad deben ser seguidas, incluyendo las siguientes.

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

**PELIGRO** - Para reducir el riesgo de electrocución:

- Siempre desenchufe el desinfectante de calzado SteriShoe® inmediatamente después de usar.
- No utilice mientras se baña.
- No coloque ni guarde el desinfectante de calzado SteriShoe® donde se pueda caer o ser tirado en una bañera o fregadero.
- No sitúe ni deje caer en agua o otro líquido.
- No saque el desinfectante de calzado SteriShoe® que ha caído al agua. Desconecte de inmediato.

**ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas.

- El desinfectante de calzado SteriShoe® nunca se debe dejar sin supervisión cuando esté enchufado a la corriente eléctrica.
- Es necesaria la supervisión constante cuando el desinfectante de calzado SteriShoe® está siendo usado cerca de niños o inválidos.
- Utilice el desinfectante de calzado SteriShoe® sólo para su uso como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice nunca el desinfectante de calzado Steri-

Shoe® si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No mire a la bombilla cuando está encendida.
- No utilice el desinfectante de calzado SteriShoe® fuera de un zapato.
- Trate el desinfectante de calzados SteriShoe® con cuidado. Usted está colocando una bombilla frágil dentro de un zapato.
- Si el desinfectante de calzado SteriShoe® no se apaga tras 45 minutos, puede ser que el temporizador no esta funcionando correctamente. Apague la unidad, desconecte la alimentación eléctrica y por favor llame al 1-866-686-Shoe(7463).
- Si la luz del interruptor de encendido/apagado parpadea, revise la bombilla para asegurarse de que no está rota. Si la bombilla se rompe, NO coloque el pie en el zapato hasta que haya eliminado todas las piezas de la bombilla rota.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o les instruya en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados \_\_para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



### Especificaciones:

Lampara UV: 10VDC, 3W

Desinfectante de Calzado SteriShoe®

Modelo: STSH-002, 20VDC, 300 mA

Adaptador de corriente: Entrada: 100 -240 V, 50/60 Hz, 0.68A Max., Clase V; Salida: 20VDC, 300 mA

**SAA120280**



### Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana de eliminación incontrolada de residuos, recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, por favor, use sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden llevar este producto para el reciclaje seguro ambiental.

## Gracias por ser un cliente de SteriShoe®.

Ha dado un paso importante para mantener sus pies sanos.

### El desinfectante SteriShoe®:

- Es comprobado científicamente para destruir los microorganismos.\*
- Es efectivo contra los microorganismos que causan hongos en las uñas, pie de atleta y el desagradable olor en los pies.
- No es tóxico. No utiliza productos químicos agresivos como aerosoles o medicamentos para matar las bacterias, hongos y gérmenes.
- Es aceptado por la Asociación Médica Estadounidense de Podología.
- Es muy fácil, seguro y cómodo de usar. ¡Sólo tiene que conectarlo y pulsar un botón!

Por favor, lea este manual para aprender a utilizar su desinfectante de calzado SteriShoe® de forma segura y eficaz. Háganos saber cómo está disfrutando de su desinfectante SteriShoe® por e-mail a [feedback@SteriShoe.com](mailto:feedback@SteriShoe.com). Nos encanta escuchar a nuestros clientes.

Atentamente,  
Adam Ullman  
Presidente y Director General

\*Los resultados de pruebas independientes están disponibles en [www.SteriShoe.com](http://www.SteriShoe.com)

## Utilice su desinfectante SteriShoe® diario

La combinación de sudor y el calor dentro de sus zapatos hace un caldo de cultivo perfecto para las bacterias y los hongos que causan hongos en las uñas, pie de atleta y mal olor. Y cuando existen padecimientos del pie, los zapatos pueden ser una fuente común de la re-infección.

Por lo tanto, para minimizar totalmente la probabilidad de una nueva infección o re-infección, los gérmenes deben ser erradicados diariamente en la fuente de riesgo.

Le recomendamos que cambie las bombillas UV de su SteriShoe® cada dos años, para garantizar la máxima eficacia en la eliminación de los microbios dañinos en su calzado.

Podemos ayudarle a recordar el cambio de las bombillas UV.

**Registre su desinfectante de calzado SteriShoe® en [www.sterishoe.com/regist.html](http://www.sterishoe.com/regist.html). Nosotros le enviaremos un correo electrónico cuando sea el momento de sustituir las bombillas UV.**


## Cómo funciona el desinfectante SteriShoe®:

El innovador desinfectante SteriShoe® mata los gérmenes que se encuentran adentro de los zapatos con un especial germicida de luz ultravioleta (UVC).

Con el primer tratamiento, un desinfectante SteriShoe® destruye hasta un **99.9%** de los microorganismos en los calzados, incluyendo las bacterias e infecciones micóticas que causan hongos en las uñas (onicomicosis), pie de atleta (tinea pedis) y el mal olor en los pies.

El desinfectante SteriShoe® es también una excelente opción para aquellos con diabetes o en general preocupados por la higiene de sus pies.

## Contenido

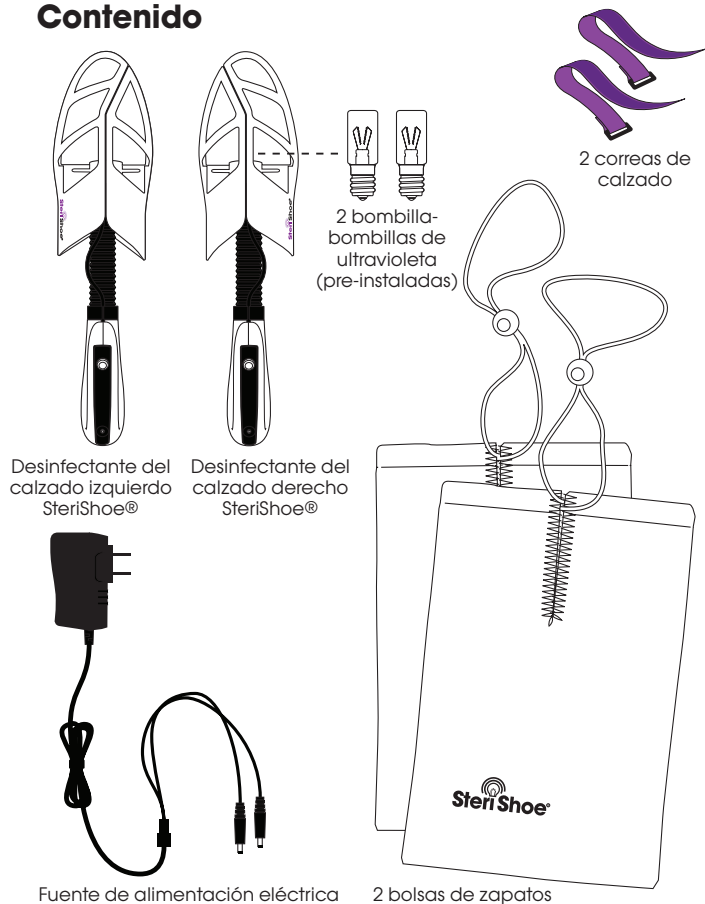


## Usando su dispositivo SteriShoe®

Su desinfectante SteriShoe® viene con características de seguridad importantes que evita la exposición a la luz UV. La siguiente es una referencia rápida sobre la forma de operar de forma segura su desinfectante de calzado SteriShoe® ultravioleta.

El botone de encendido/apagado funciona como un indicador de estado.

Tipos de estado:

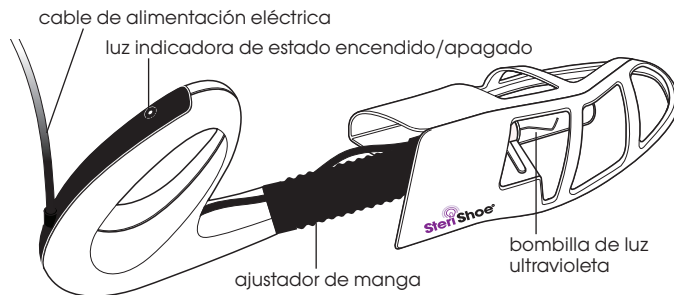


## Utilice el desinfectante de calzado SteriShoe® solo como se indica.

Para evitar errores cuando se utiliza el desinfectante de calzados SteriShoe®, por favor siga estas instrucciones:


### Instalación o reemplazo de una bombillabombilla

Con un paño suave y seco, sujete el frente de la bombillabombilla UV y atorníllelo en el casquillo del desinfectante de calzado SteriShoe®. Repita este paso para el segundo desinfectante de calzado SteriShoe®.

### Instrucciones de uso general

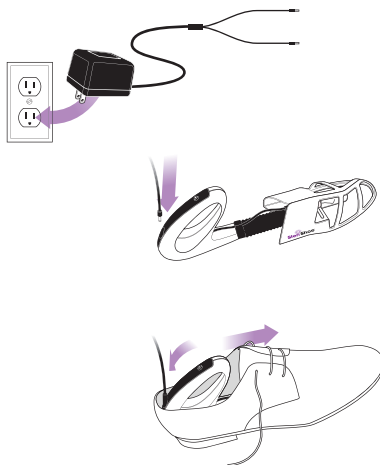

1. Enchufe la fuente de alimentación en un tomacorriente estándar (AC 100-240V).
2. Conecte los cables de alimentación a cada desinfectante de calzado SteriShoe®.
3. Inserte el desinfectante SteriShoe® derecho en el zapato derecho y el desinfectante SteriShoe® izquierdo en el zapato izquierdo.

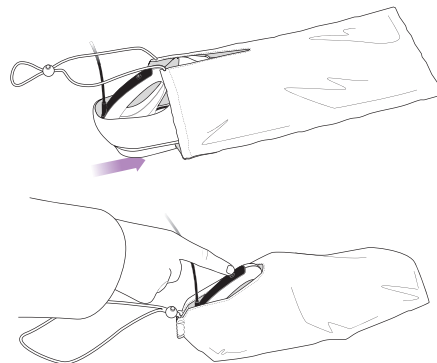

4. Coloque cada desinfectante de calzado SteriShoe® y el zapato en la bolsa para calzados marca SteriShoe®.
5. Cierre cada bolsa de zapato con el cordón.
6. Presione el botón de encendido/apagado para comenzar a tratar a sus zapatos.
7. Si el botón de encendido/apagado continuamente se muestra iluminado de color púrpura, es indicativo de que el desinfectante de calzado SteriShoe® está en tratamiento de los zapatos y se apagará después de 45 minutos aproximadamente. NO retire la bolsa de zapatos mientras el desinfectante de calzado SteriShoe® está haciendo el tratamiento de un zapato.
8. Una vez que el proceso de tratamiento esta completo, la luz de encendido/apagado ya no se ilumina y se puede retirar el desinfectante de calzado SteriShoe® de los zapatos.

Si necesita sacar un desinfectante de calzado SteriShoe® de un zapato cuando está en proceso de tratamiento, presione el botón de apagado/encendido

para apagarla. Si la luz del botón de encendido/apagado no tiene una constante iluminación, entonces es seguro retirar el desinfectante de calzado SteriShoe®, ya que se interrumpió el tratamiento.

**Nota:** Si el botón de encendido y apagado parpadea, entonces es que probablemente una de las características de seguridad se activó. Vea la sección de solución de problemas (en la página 73) para más información.

## Usando su dispositivo SteriShoe®

El desinfectante de calzado SteriShoe® ultravioleta no funcionará si:

- El desinfectante de calzado SteriShoe® se utiliza en un zapato sin el apoyo del talón. Debe ser comprimido dentro del zapato para operar correctamente. (Vea las instrucciones para el uso de la correa SteriShoe® en la página opuesta);
- Detecta la luz ambiente. La bolsa para zapatos siempre debe usarse para oscurecer el ambiente alrededor de los zapatos.

Así como sus pies merecen un descanso, el desinfectante de calzado SteriShoe® necesita un descanso también. Permita que su desinfectante de calzado SteriShoe® repose por lo menos quince minutos entre cada uso.

## Usando su correa de calzado SteriShoe®



**1.** Inserte la correa abierta a través del mango del desinfectante SteriShoe® (con la cinta del cierre de velcro hacia afuera).




**2.** Inserte la correa a través de la hebilla en el extremo de la correa de SteriShoe®.



**3.** Empuje el talón del desinfectante SteriShoe® hacia adelante.



**4.** Mientras empuja el talón hacia adelante, apriete la correa y fijela con el velcro.

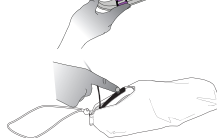

**5.** Conecte los desinfectantes de calzado a la fuente de alimentación eléctrica, colóquelos en las bolsas para zapatos SteriShoe® y enciéndalos.



**NO** permita que la cinta separadora de los dedos en las sandalias entre en las dos mitades del frente de su desinfectante SteriShoe®. Para el uso con sandalias donde ello ocurra, revierta los desinfectantes de zapatos (es decir, utilice el derecho en el zapato izquierdo y el izquierdo en el zapato derecho) para evitar este problema.

## Solución de problemas

Hay características de seguridad en el desinfectante de calzado SteriShoe® para evitar que un usuario esté expuesto a la luz ultravioleta. Si el botón de apagado/encendido parpadea, es probable que una de las características de seguridad haya sido activada. La tabla de error se muestra a continuación. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 1-866-686-7463, ext. 2 para asistencia técnica.

### Error and Remedio



parpadeo pausa parpadeo

El sensor de luz ambiental ha detectado la luz. Asegúrese de que el desinfectante de calzado SteriShoe® se encuentra dentro de un zapato. Si el calzado es de tipo sandalia o abierto, asegúrese siempre de colocar el desinfectante de calzado SteriShoe® y la sandalia dentro de la bolsa de zapatos. Si el error persiste, pruebe oscurecer el interior del calzado presionando suavemente hacia abajo la lengua del zapato cuando el desinfectante de calzado SteriShoe® este encendido o ubíquelos en una habitación oscura.



parpadeo parpadeo pausa parpadeo parpadeo

El desinfectante de calzado SteriShoe® no está dentro del zapato o el calzado es demasiado grande para comprimir

el interruptor de seguridad. Trate de usar el desinfectante de calzado SteriShoe® en un zapato más pequeño o ponga algo, como un par de medias, entre el talón del zapato y el desinfectante de calzado SteriShoe®. Si está utilizando el desinfectante de calzado SteriShoe® en una sandalia o calzado que no tiene el apoyo del talón, use la correa de calzado SteriShoe® con el fin de mantener el desinfectante SteriShoe® comprimido.



parpadeo parpadeo parpadeo pausa parpadeo parpadeo parpadeo

La bombilla está dañada o no está atornilla por completo. Si tiene este error, desconecte la alimentación eléctrica e intercambia las bombilla-bombillas de los desinfectantes izquierdo y derecho.

- Si las dos unidades funcionan bien (la luz de encendido/apagado permanece encendida), la bombilla puede que no haya sido enroscada por completo.
- Si el problema persiste con la bombilla, por ejemplo, el desinfectante de calzado derecho no está funcionando y después de intercambiar las bombilla-bombillas, el desinfectante izquierdo no está funcionando, esta última bombilla deberá ser reemplazada.

**Nota:** Después de encender el desinfectante de calzado, le tomará unos 10 segundos para que se produzca el indicador de error. Este es el tiempo necesario para encender la bombilla UVC.

## Información Importante



**NO** mire la luz ultravioleta de su desinfectante de calzado SteriShoe® cuando está encendido, porque emite una luz ultravioleta que puede ser perjudicial para los ojos

y la piel. Se puede saber que la luz del desinfectante de calzado SteriShoe® está iluminando porque el botón de encendido/apagado lo indicará con su luz fija, brillante y de color púrpura.

Si el botón de encendido y apagado parpadea, es que se ha producido un error.

El desinfectante de calzado SteriShoe® se ha fabricado incorporando características de seguridad para reducir la probabilidad de accidentes vinculados con la exposición de la bombilla UV. La activación de una de estas características del dispositivo de seguridad es probable que sea debido a un error. Consulte la parte de solución de problemas para obtener más información.

LA BOMBILLA CONTIENE MERCURIO (Hg). La bombilla contiene una pequeña esfera de metal que se puede escuchar dentro de la bombilla. Esto es normal, la bombilla no está rota. Dado que el mercurio es tóxico, por favor deshágase responsablemente de la bombilla de acuerdo con las leyes locales de eliminación o reciclaje. Para más información, consulte: [www.lamprecycle.org/res-statelaws.shtml](http://www.lamprecycle.org/res-statelaws.shtml).

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La manipulación está sujeta a las siguientes condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

**Advertencia:** Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del desempeño del dispositivo podrían anular el derecho del usuario para operar el equipo.

### Aviso legal

- El desinfectante de calzado SteriShoe® destruye hasta el 99,9% de los microorganismos específicos. Su objetivo son aquellos microorganismos que entran en contacto directo y sin obstáculos a la luz UV.
- El desinfectante de calzado SteriShoe® no tiene condiciones para ser considerado un tratamiento médico curativo, sino que está destinado a proporcionar un ambiente limpio y saludable para los pies dentro de los zapatos.
- La luz UV del desinfectante SteriShoe® puede decolorar el interior del zapato.
- La luz UV puede acelerar la degradación de ciertos materiales.

## Información sobre la garantía

Un año de garantía limitada

**Cobertura de la garantía:** Shoe Care Innovations, Inc. ("SCI") garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos en materiales o mano de obra durante un período de un (1) año\* desde la fecha de compra, con las excepciones que se indican a continuación.

\*El plazo de garantía para las bombillas es de 60 días a partir de la fecha de compra.

**Lo que no está cubierto:** Esta garantía no cubre daños causados por accidente, alteración o modificación, cuidado inadecuado, mal uso, usos para los cuales el producto no fue diseñado o por otras causas no derivadas de defectos en materiales o mano de obra.

**Cumplimiento de la garantía:** Durante el período de la garantía, SCI se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto considerado defectuoso. Contacte SCI al 1-866-686-Shoe(7463) para obtener servicio de garantía o también puede consultar [www.SteriShoe.com](http://www.SteriShoe.com) para más información.

**Negación de garantía:** Todas las garantías implícitas que surjan de esta venta, incluyendo pero no limitadas a las garantías implícitas por descripción, comerciabilidad o disposición para un propósito particular, están limitadas en duración de acuerdo con lo establecido en la cobertura de garantía. En ningún caso SCI será responsable de la pérdida de utilidad de este producto o por cualquier daño indirecto, especial, incidental o consecuente, tampoco será responsable por costos o gastos incurridos por parte del consumidor o cualquier otro usuario de este producto, ya sea debido a un incumplimiento de contrato, negligencia, responsabilidad objetiva o de otra manera.

SCI no tendrá ninguna responsabilidad por lesiones personales, cualquier daño a la propiedad, cualquier daño especial, incidental, accidental o daños por consecuencia de ningún tipo como resultado del uso de este producto. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños indirectos o incidentales, la limitación anterior puede no aplicarse a usted.

**Recursos legales:** Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.



Rev. 3/2012

Copyright © 2012 Shoe Care Innovations, Inc.  
SteriShoe, the SteriShoe logo, and the Shoe Care Innovations, Inc. logo are registered trademarks of Shoe Care Innovations, Inc. in the U.S. and other jurisdictions.  
Protected by U.S. and International patents.  
Additional patents pending.

Copyright © 2012 Shoe Care Innovations, Inc.  
SteriShoe, le logo SteriShoe et Shoe Care Innovations, Inc. sont des marques déposées de Shoe Care Innovations, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres juridictions.  
Protégés par les brevets internationaux et des Etats-Unis.  
Des brevets supplémentaires sont en attente.

Copyright © 2012 Shoe Care Innovations, Inc.  
SteriShoe, das SteriShoe logo und die Firma Shoe Care Innovations, Inc. sind in den USA und in anderen Gerichtsbarkeiten eingetragene Marken der Shoe Care Innovations, Inc. In den USA und international patentrechtlich geschützt.  
Weitere Patente sind angemeldet.

Copyright © 2012 Shoe Care Innovations, Inc.  
SteriShoe, el logotipo de SteriShoe, y el logotipo de Shoe Care Innovations Inc. están registrados son marcas registradas de Shoe Care Innovations Inc. en los EE.UU. y otras jurisdicciones.  
Protegidos por patentes de EE.UU. e internacionales.  
Patentes adicionales pendientes

Shoe Care Innovations, Inc.  
501 Seaport Court, Suite 101  
Redwood City, CA 94063

